

PSL one

Excelencia
en óptica



Keeler

Keeler

Excelencia en óptica

Keeler – Expertos británicos en la fabricación de productos de excelente relación calidad-precio

Chasis de aluminio mecanizado con precisión.

Diseñado y fabricado por Keeler con la resistencia adecuada para soportar las exigencias diarias del entorno oftálmico actual. Ligero de peso, duradero y resistente.

Óptica avanzada, amplificación de x10 aumentos

Keeler utiliza un vidrio multicapa de calidad superior en la fabricación de su sistema óptico revestido de elementos y capas múltiples para asegurar un rendimiento máximo. La claridad está garantizada.

Iluminación regulable

Iluminación halógena probada con niveles de iluminación controlados por un reóstato que permite un control total de los niveles de luz. De cero a máximo, según las preferencias del usuario.

Grandes características de la lámpara de hendidura.

Usabilidad portátil


Unas características singulares como los blancos de fijación y la trayectoria de luz cuadrada de 1 mm para evaluar la presencia de flare en la cámara anterior establecen la nueva norma para las lámparas de hendidura portátiles.

Para la era digital

Conecte simplemente un iPhone 4 y el PSL se convierte en una lámpara de hendidura digital portátil, perfecta para fines docentes. ¿Qué podría ser más sencillo o económico?



Ruedecilla de hendiduras

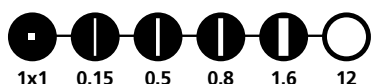

Ruedecilla de filtros

Sin rojo, azul, neutro (0,8) y transparente



Amplificación



Sistema de hendidura y filtro

Tipo de hendidura	Lámpara de hendidura con ruedecilla giratoria de selección de hendidura
Longitud de la hendidura	12mm
Anchura de la hendidura	Hendiduras de 0,15mm, 0,5mm, 0,8mm y 1,6mm, círculo de 12mm y un cuadrado de 1 mm
Filtros	Sin rojo, azul, neutro 0,8 y transparente
Protección IR	Filtro de bloqueo del IR integrado
Ángulo de la hendidura	+/- 60°
Control de iluminación	Continuamente variable de bajo a alto brillo
Blancos de fijación	Sistema LED, doble clic del gatillo
Fuente de alimentación	
Unidad de alimentación	Modo conmutable, (110V - 240V) +/- 10% clavija múltiple
Potencia de salida	30VA (12V CC 2,5A)
Biomicroscopio	
Tipo	Lámpara de hendidura con biomicroscopio binocular de mano
Óptica	Binoculares convergentes a 13°
Amplificación	x10
Distancia de trabajo del objetivo a x10	16mm
Datos para efectuar los pedidos	
PSL One	3010-P-2001
Adaptador de iPhone 4	3010-P-7010 (incluido)
Maletín	3010-P-7000

iPhone es marca registrada de Apple Inc
iPhone no incluido con adaptador o PSL

PSL one

Keeler Limited, Clewer Hill Road, Windsor, Berkshire SL4 4AA

+44 (0)1753 857177 | www.keeler.co.uk | info@keeler.co.uk

Keeler Instruments Inc. 456 Parkway Broomall, PA 19008 EEUU

Teléfono gratuito: 1 800 523 5620 | Fax: 1 610 353 7814 | www.keelerusa.com