


KAHOOK

DUAL BLADE



1. La punta afilada perfora fácilmente la malla trabecular
2. La rampa eleva y extiende la malla trabecular
3. La navaja doble corta y remueve la malla trabecular
4. La base, previene el daño de la pared anterior del canal y facilita un movimiento suave

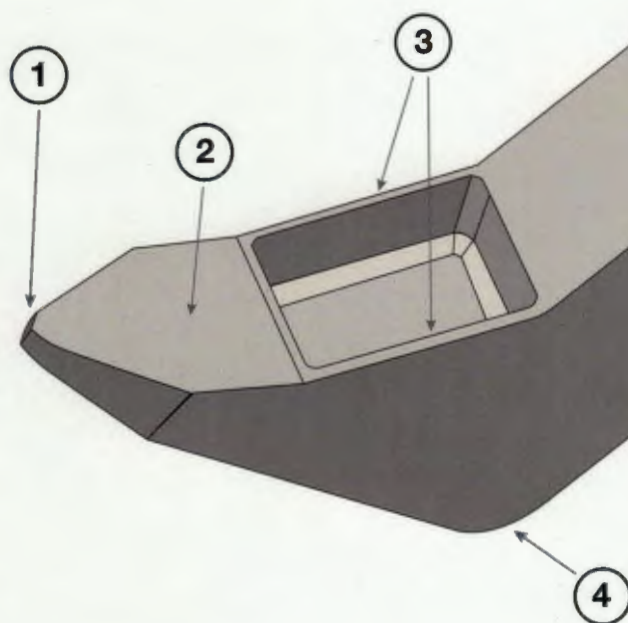

**Obtenga su Certificación
para cirugía con KDB @**

KDBcert.com



New World Medical

909.466.4304

www.nwm.vision

10763 Edison Court
Rancho Cucamonga, CA 91730



Part # 50-0076-S Rev New 02/16

KAHOOK

DUAL BLADE

Features:

- Cuchillete oftalmológico de un solo uso
- Abordaje Ab interno a través de una incisión de 1.2 mm en cornea clara
- Navajas únicas, diseñadas para insertarse en el canal de Schlemm
- Cuchillas dobles para remover con precisión la malla trabecular y evitar fibras residuales
- Conserva la vía de drenaje fisiológica

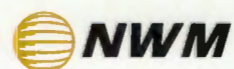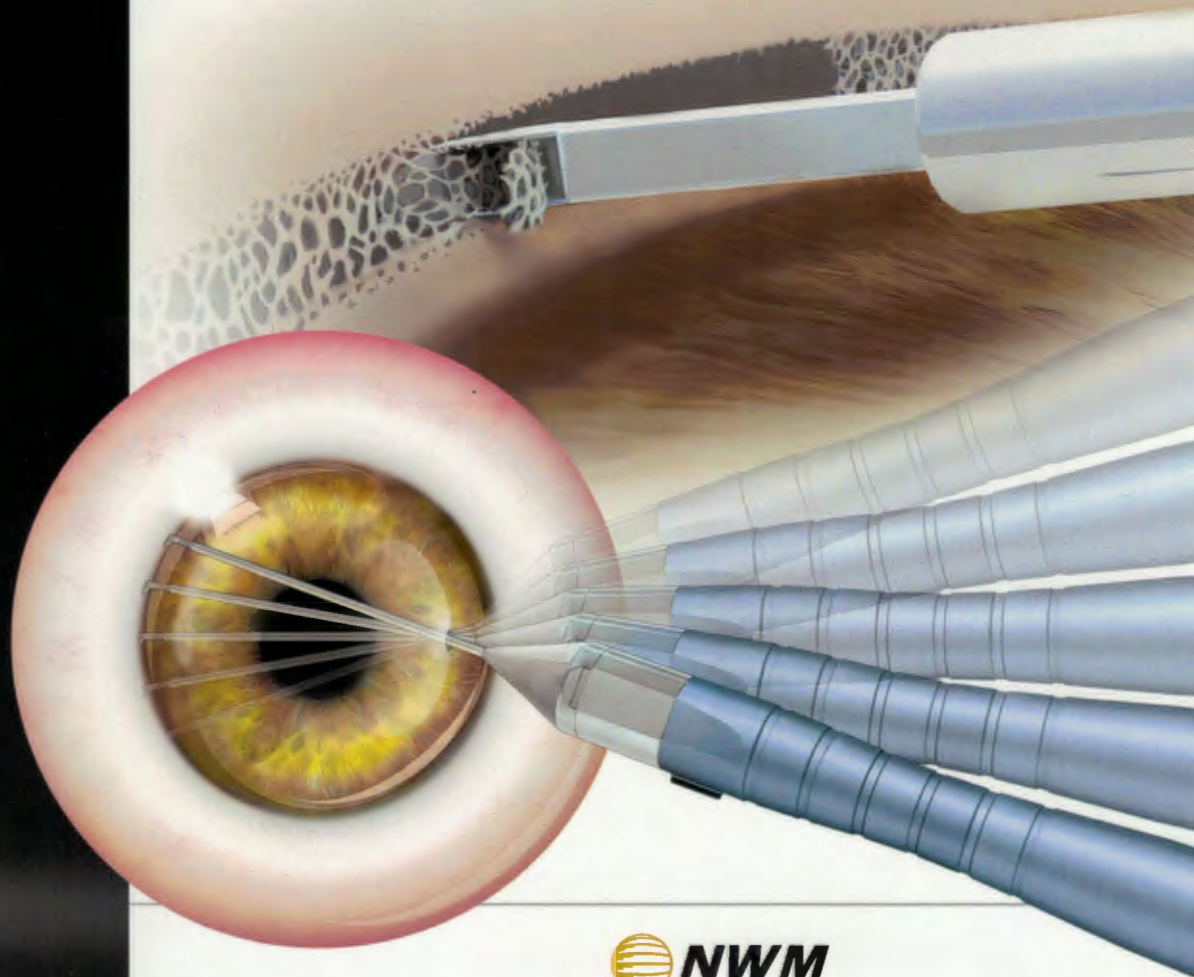

909.466.4304

10763 Edison Court
Rancho Cucamonga, CA 91730, USA