



The future of vision

ESNOOPER CLIP




ESNOOPER CLIP

Implante de Glaucoma

Nombre de marca	ESNOOPER CLIP
Referencia	VCLIP-AJL
Descripción e indicación	El ESNOOPER CLIP es un implante no reabsorbible cuyo diseño de doble plato potencia dos vías de drenaje: Trabecular (intraescleral y supraciliar) y uveoescleral. El implante uveoescleral ESNOOPER CLIP está indicado en el procedimiento de esclerectomía profunda no perforante (EPNP) en cirugías de glaucoma de ángulo abierto. Para su implantación, es preciso implantar el plato con escotaduras en el espacio supracoroideo y posicionar el plato superior sobre el lecho escleral. Las escotaduras laterales permiten una perfecta fijación del implante evitando así su desplazamiento sin necesidad de sutura.
Medidas	5,50mm X 1,30mm X 2, 20mm.
Orificios	3 (drenaje).
Material	Hidroxietil Metacrilato (HEMA).
Método de esterilización	Vapor.
Presentación	El implante ESNOOPER CLIP se presenta en un vial individual estéril alojado en una pinza-soporte sumergida en agua altamente purificada para mantener su adecuada hidratación.
Caducidad	3 años

* Producto con marcado CE

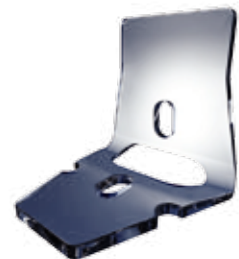

Instrumental quirúrgico EPNP (recomendado)

Nombre de marca	KIT EPNP	Referencia	AJL- KIT-001
Definición	Kit EPNP (Esclerectomía profunda no penetrante).		
Descripción	El kit de EPNP se presenta en blister de plástico rígido en el cual se agrupan las siguientes referencias (*): • EPNP-2001 Blefaro Liebermann 14mm. • EPNP-2002 Marcador Escleral doble. • EPNP-2003 Espátula Mermoud. • EPNP-2004 Pinza Mermoud. • EPNP-2005 Micro-tijera curva. • PST-4600A Caja de esterilización (10x16x2 cm).		

* Las piezas de instrumental se pueden suministrar de modo conjunto (Kit EPNP) o bien por separado.



REV: 04. 04/2019