




The future of vision

ENDO-K PRO

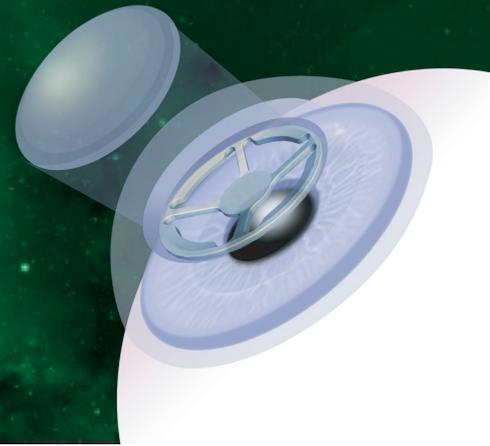

ENDO-K PRO

Implante intercorneal para trasplante de córnea

<i>Nombre de marca</i>	ENDO-K PRO			
<i>Referencias</i>	EQP75	EQP80	EQP85	EQP90
<i>Diámetro exterior</i>	7,50 mm	8,00 mm	8,50 mm	9,00 mm
<i>Descripción e Indicaciones</i>	<p>Dispositivo de PMMA de grado médico, diseñado para su implantación entre endotelio corneal e injerto en cirugías de trasplante de córnea.</p> <p><i>Características:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Doble anillo circular de diferentes diámetros. • Fabricado de una sola pieza de PMMA. • No precisa inyector. • Sencilla integración y manejo. <p>Dispositivo médico para uso oftalmológico indicado para ser implantado entre el endotelio corneal del paciente y el injerto de córnea en la cirugía de trasplante de córnea, para evitar la aparición de efectos secundarios indeseados que hagan fracasar la intervención.</p> <p>En general la utilización del dispositivo ENDO-K PRO permite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Separación mecánica del endotelio corneal receptor e injerto corneal. • Facilitar la supervivencia del injerto corneal. • Prevenir efectos secundarios indeseados en la cirugía de trasplante de córnea. 			
<i>Material</i>	Polimetilmetacrilato (PMMA) con filtro UV.			
<i>Método de esterilización</i>	Óxido de etileno (ETO).			
<i>Presentación</i>	Implante unitario, envasado estéril.			
<i>Caducidad</i>	4,5 años			

* Producto con marcado CE

REV: 01A. 02/2021