



El nuevo
Cryomatic MK II

Keeler

El nuevo Cryomatic MK II

Perfección evolucionada

Partiendo de la excepcional fiabilidad de su predecesor, Cryomatic MK II ofrece calidad y versatilidad cuando se utilizan sondas desechables o reutilizables.

El nuevo sistema de conexión de Cryomatic MK II le permite conectar una sonda desechable de un solo uso o una sonda reutilizable sin necesidad de adaptador. El nuevo software integrado detecta automáticamente el tipo de sonda en uso y ajusta la unidad como corresponda, lo que significa que la unidad está lista para su uso en minutos.




Sondas Cryomatic MK II

Sin ciclo de purga para los elementos desechables.

Cuando utilice sondas de un solo uso, el Cryomatic MK II permitirá instantáneamente al usuario acoplar la sonda a la consola y estará lista para funcionar: ya no es necesario esperar a un ciclo de purga.

Cryomatic MK II tiene sondas reutilizables totalmente nuevas; diseñado para una facilidad de conexión y, con forma de punta clásica, son perfectas para sus necesidades. El software integrado detectará y optimizará automáticamente sus parámetros para un rendimiento perfecto, independientemente del tipo de sonda que utilice, y asegurará un ciclo de purga corto una y otra vez.

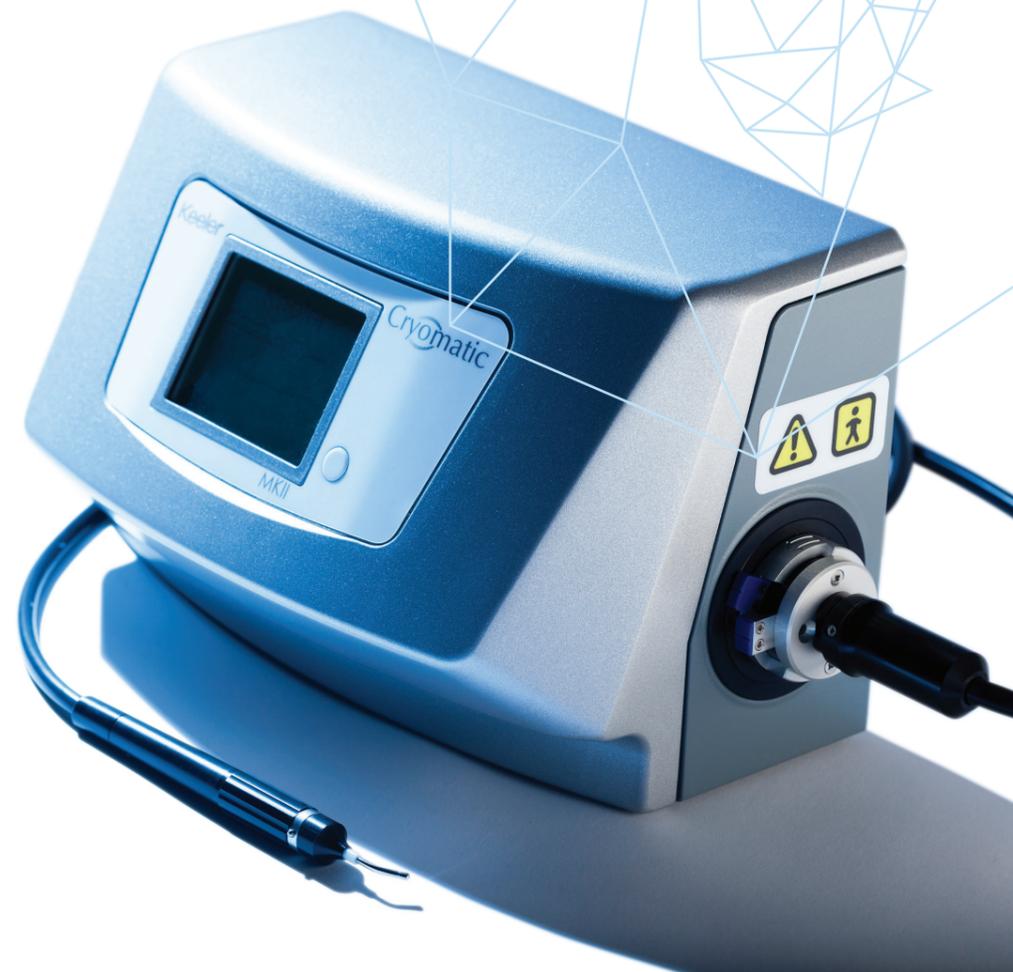

Cryomatic

Adaptadores de bombona

Su Cryomatic puede utilizarse con gas dióxido de carbono (CO₂) o de óxido nitroso (N₂O) procedente de botellas no sifónicas a través de uno de los acoplamientos con perno indexado (PIY) o adaptadores de roscas de tornillo o adaptadores de bombona abajo.

2508-P-7017

Acoplamiento con perno indexado para bombona de gas de óxido nitroso de tamaño E



2508-P-7015

Acoplamiento con perno indexado para bombona de gas de dióxido de carbono de tamaño E

2508-P-7016

Adaptador para bombona de gas de dióxido de carbono de tamaño F



2508-P-7018

Adaptador para bombona de gas de óxido nitroso de tamaño F

Bombona de tamaño E

Dimensiones (cm) 50x15
Gr. Peso (kg) 7



Bombona de tamaño F

Dimensiones (cm) 86x14
Gr. Peso (kg) 18

Números de pieza

2509-P-1010 Consola Cryomatic con conmutador de pie

Gama de sondas Standard Cryomatic

2509-P-8020 Sonda retinal Standard de 2,5 mm

2509-P-8021 Sonda retinal extendida de 2,5 mm

Sondas crioquirúrgicas desechables

2508-P-7022 Sondas retinales Standard de 2,5 mm, caja de 10

Gama de sondas de pedido especial Cryomatic

2509-P-8022 – Sonda retinal de alcance medio 2,5 mm

2509-P-8023 Sonda intravítrea de 0,89 mm

2509-P-8024 – Sonda curva de cataratas de 1,5 mm

2509-P-8025 Sonda de glaucoma de 3 mm

2509-P-8026 Sonda Collins para triquiiasis 4 x 10 mm

Accesorios

2508-P-7016 Adaptador para bombona de gas de dióxido de carbono de tamaño F

2508-P-7015 Acoplamiento con perno indexado para bombona de gas de dióxido de carbono de tamaño E

2508-P-7018 Adaptador para bombona de gas de óxido nitroso de tamaño F

2508-P-7017

Acoplamiento con perno indexado para bombona de gas de óxido nitroso de tamaño E

2509-P-8015 Cajas de esterilización de sondas (para sondas Cryomatic únicamente)

2508-P-7005 Cryo Trolley



① 2509-P-8020 – Sonda retinal Standard

② 2509-P-8021 – Sonda retinal extendida

③ 2509-P-8022 – Sonda retinal de alcance medio

④ 2509-P-8025 – Sonda de glaucoma

⑤ 2509-P-8024 – Sonda curva de cataratas

⑥ 2509-P-8023 – Sonda intravítrea

⑦ 2509-P-8026 – Sonda Collins para triquiiasis



Más instrumentos Keeler

Hemos fabricado durante más de noventa años instrumentos oftalmológicos de precisión de máxima calidad.

Vea nuestra gama completa en www.keeler.co.uk | www.keelerusa.com

¿Tiene una pregunta? - Llámenos

Reino Unido: +44 (0)1753 857177 China: +86 10 512 61868

EE. UU.: +1 610 353 4350 India: +91 22 6708 0400

EAU: +971 52 9022130 Brasil: +55 11 4302 6053

The logo for Keeler, featuring the word "Keeler" in a bold, blue, sans-serif font.