




AJL-CTR

Anillo de Tensión Capsular

Nombre de marca		AJL ANILLO DE TENSION CAPSULAR					
Modelos		AC: sección redonda / ACS: sección cuadrada AC-PL*: sección redonda precargado / ACS-PL*: sección cuadrada precargado					
Referencias	AC	AC001002	AC001102	AC001202	AC001252	AC001302	AC001402
	ACS	ACS001002	ACS001102	ACS001202	ACS001252	ACS001302	ACS001402
	AC-PL*	AC001002-PL	AC001102-PL	AC001202-PL	AC001252-PL	AC001302-PL	AC001402-PL
	ACS-PL*	ACS001002-PL	ACS001102-PL	ACS001202-PL	ACS001252-PL	ACS001302-PL	ACS001402-PL
Diámetro abierto		10 mm	11 mm	12 mm	12 mm	13 mm	14 mm
Diámetro cerrado		9 mm	10 mm	10 mm	10,5 mm	11 mm	12 mm
Descripción e Indicaciones		Estos dispositivos están diseñados para ser insertados en el saco capsular en cualquier momento durante la cirugía de catarata, con el fin de distender ecuatorialmente el saco capsular y por consiguiente estabilizar el saco capsular durante y tras la misma en aquellos pacientes en los que exista, entre otros: • Debilidad zonular primaria o secundaria • Zonulolisis parcial • Traumatismo • Síndrome pseudoexfoliativo • Riesgo de retracción capsular (e.g. uveítis) Por otro lado, la implantación de los anillos de tensión puede resultar beneficiosa en la siguiente lista (no exhaustiva) de situaciones: • Favorecer el centrado y estabilización de las lentes intraoculares • Disminución de cicatrización asimétrica del saco capsular • Prevenir fibrosis y contracción de la cápsula anterior • Estabilizar la cápsula en casos de miopía alta • Centrado de sacos capsulares					
Material		Polimetilmetacrilato de grado médico (PMMA).					
Método de esterilización		Óxido de etileno (ETO).					
Presentación		Envase unitario, estéril. Los modelos AC / ACS se presentan en un portador que facilita la extracción del mismo para su implantación manual. Mientras que los modelos AC-PL* / ACS-PL* se suministran precargados en un sistema de inyección de un solo uso que libera el anillo en sentido contrario a las agujas del reloj.					
Caducidad		3 años precargado. 4,5 años sin precargar					

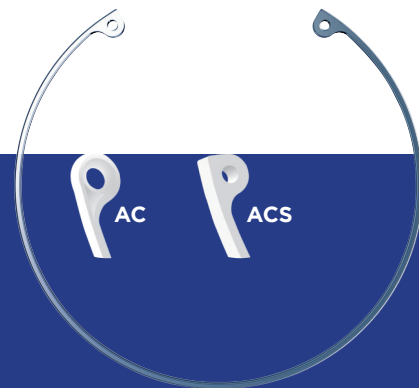


*Inyector para anillos de tensión capsular
Ref.: AC-PL y ACS-PL

* Producto con marcado CE





AJL-CTR

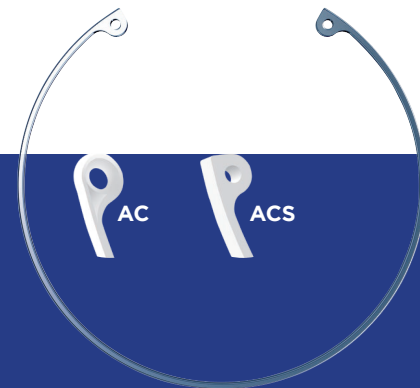

Capsular Tension Ring

Brand name		AJL CAPSULAR TENSION RING					
Models		AC: round section / ACS: square section. AC-PL*: round section pre-loaded / ACS-PL*: square section pre-loaded					
References	AC	AC001002	AC001102	AC001202	AC001252	AC001302	AC001402
	ACS	ACS001002	ACS001102	ACS001202	ACS001252	ACS001302	ACS001402
	AC-PL*	AC001002-PL	AC001102-PL	AC001202-PL	AC001252-PL	AC001302-PL	AC001402-PL
	ACS-PL*	ACS001002-PL	ACS001102-PL	ACS001202-PL	ACS001252-PL	ACS001302-PL	ACS001402-PL
Open diameter		10 mm	11 mm	12 mm	12 mm	13 mm	14 mm
Closed diameter		9 mm	10 mm	10 mm	10.5 mm	11 mm	12 mm
Description and indications		These devices are designed to be inserted into the capsular bag at any time during cataract surgery, in an aim to distend the capsular bag equatorially and subsequently stabilise the capsular bag during and after the surgical procedure in patients who present with, among others: • Primary or secondary zonular weakness • Partial zonulolysis • Trauma • Pseudoexfoliation syndrome • Risk of capsular retraction (e.g. uveitis) Equally, the implantation of tension rings can prove beneficial in the following (non-exhaustive) list of situations: • To promote the centring and stabilisation of intraocular lenses • Decreased asymmetric capsular bag healing • To prevent fibrosis and contraction of the anterior capsule • To stabilise the capsule in cases of high myopia • To centre capsular bags					
Material		Medical grade Polymethyl Methacrylate (PMMA).					
Sterilization method		Ethylene Oxide (ETO).					
Package		Single and sterile. The models AC/ACS are supplied in an easy-to-handle carrier that facilitates the manipulation of the CTR to be implanted manually. The models AC-PL*/ACS-PL* are supplied pre-loaded in a single-use injection system that releases the CTR in a counter-clockwise direction.					
Shelf-life		3 years pre-loaded. 4,5 years non pre-loaded					



* Injector for capsular tension rings
Ref.: AC-PL and ACS-PL

* Product with CE marking



REV: 05. 07/2022