





CANABRAVA RING

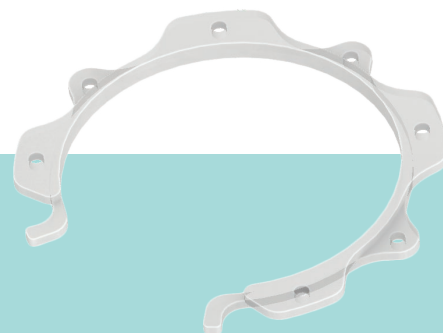

Expansor de Iris


Nombre de marca	CANABRAVA RING
Referencia	CANA - RING
Descripción e indicaciones	Anillo extensor de iris diseñado para extender de forma segura el iris, facilitando las cirugías de facoemulsificación y aquellas en las que la pupila no se dilata adecuadamente mediante fármacos, consiguiéndose una apertura pupilar de 6,3mm, y, manteniéndose una dilatación estable durante la cirugía, que permite mejorar el acceso y el campo de visión del cirujano. • Anillo semicircular de 300º con apertura de 60º fabricado de una sola pieza. • No precisa inyector. • Sencilla adaptación y extracción. • Posibilidad de introducir el anillo en incisiones inferiores a 2mm. • Fácil colocación en pupilas menores de 4,5 mm y en cámaras estrechas. • Óptima visualización. • Dispositivo desechable, no reesterilizable.
Material	Polimetilmetacrilato de grado médico (PMMA).
Método de esterilización	Óxido de etileno (ETO).
Presentación	Envasado unitario estéril.
Caducidad	4,5 años

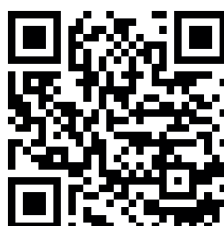

REV: 05. 07/2022




CANABRAVA RING

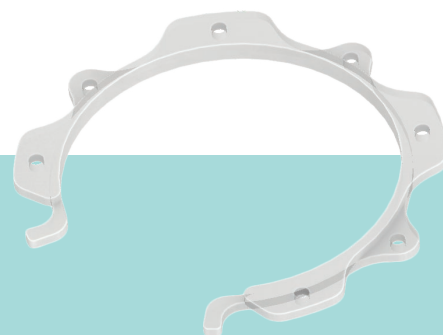

Iris Expander Ring

Brand name	CANABRAVA RING
Reference	CANA - RING
Description and Indications	An iris expander ring designed to safely expand the iris in order to simplify phacoemulsification, as well as surgeries in which the pupil does not dilate properly using pharmaceuticals. It provides a pupillary opening of 6.3mm and keeps dilation stable during surgery, improving the surgeon's access and field of vision. • 300° semicircular ring with a 60° opening made from a single piece. • Does not require an injector. • Easy to adapt and remove. • The ring can be inserted in incisions smaller than 2 mm. • Easy to insert in pupils smaller than 4.5 mm and in shallow chambers. • Optimum visibility. • Disposable device that cannot be re-sterilized. • Myosis. • Coloboma. • Traumatic sector iridectomy. • Intraoperative floppy iris syndrome. • Iris prolapse. • Small pupils. • Rigid iris tissue due to a pseudoexfoliation. • Vitrectomy with small pupils.
Material	Medical grade Polymethyl Methacrylate (PMMA).
Sterilization method	Ethylene Oxide (ETO).
Packaging	Sterile, single unit.
Shelf-life	4.5 years

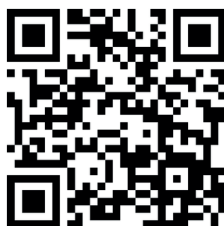

REV: 05. 07/2022