




ENDO-K PRO

Implante Interconal para Trasplante de Córnea

Nombre de marca	ENDO-K PRO			
Referencias	EQP75	EQP80	EQP85	EQP90
Diámetro exterior	7,50 mm	8,00 mm	8,50 mm	9,00 mm
Descripción e Indicaciones	Dispositivo de PMMA de grado médico, diseñado para su implantación entre endotelio corneal e injerto en cirugías de trasplante de córnea. <i>Características:</i> • Doble anillo circular de diferentes diámetros. • Fabricado de una sola pieza de PMMA. • No precisa inyector. • Sencilla integración y manejo. Dispositivo médico para uso oftalmológico indicado para ser implantado entre el endotelio corneal del paciente y el injerto de córnea en la cirugía de trasplante de córnea, para evitar la aparición de efectos secundarios indeseados que hagan fracasar la intervención. En general la utilización del dispositivo ENDO-K PRO permite: • Separación mecánica del endotelio corneal receptor e injerto corneal. • Facilitar la supervivencia del injerto corneal. • Prevenir efectos secundarios indeseados en la cirugía de trasplante de córnea.			
Material	Polimetilmetacrilato (PMMA) con filtro UV.			
Método de esterilización	Óxido de etileno (ETO).			
Presentación	Implante unitario, envasado estéril.			
Caducidad	4,5 años			

* Producto con marcado CE

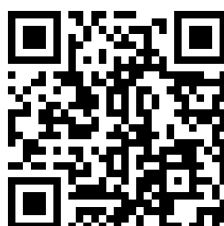

REV: 05. 07/2022




ENDO-K PRO

Intercorneal Implant for Corneal Transplant

Brand name	ENDO-K PRO			
References	EQP75	EQP80	EQP85	EQP90
Outer diameter	7.50 mm	8.00 mm	8.50 mm	9.00 mm
Description and Indications	Device of medical grade PMMA, designed for its implantation between the corneal endothelium and the corneal graft in corneal transplant surgeries. <i>Characteristics:</i> • Double circular ring, with different diameters. • PMMA single piece. • No injector needed. • Easy manipulation and integration. Medical device for ophthalmological use, indicated for its implantation between the patient's corneal endothelium and the donor corneal graft in corneal transplant surgeries. EQP device helps to avoid unwanted secondary effects that could make surgical intervention failure. In general, ENDO-K PRO device allows to: • Mechanical separation of patient's corneal endothelium and donor corneal graft. • Corneal graft survival help. • Unwanted secondary effects prevention in corneal transplant surgeries.			
Material	Polymethyl Methacrylate (PMMA) with UV filter			
Sterilization method	Ethylene oxide (EtO)			
Presentation	Unitary implant, sterile packaging			
Shelf-life	4.5 years			

* Product with CE marking

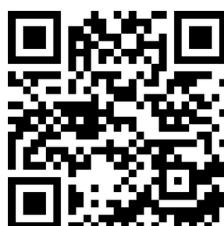

REV: 05. 07/2022