



NPB INDENTADOR MACULAR



Indentador Macular


Referencia	NPB
Nombre de marca	NPB INDENTADOR MACULAR
Definición	Indentador macular
Indicaciones	• Retinosquisis macular miópica con estafiloma de polo posterior. • Desprendimiento de retina asociada al agujero macular miópico con estafiloma posterior.
Descripción del producto	El indentador macular está fabricado en PMMA recubierto de silicona de grado médico, que incrementa su biocompatibilidad. Posee una superficie de indentación con un casco esférico en su parte superior y un brazo cuya longitud varía dependiendo de la longitud axial del ojo del paciente. El cinturón de silicona insertado en el brazo del implante facilita la incorporación de una sonda de iluminación que mediante su reflejo permite visualizar su correcto posicionamiento en el lugar deseado de indentación.
Longitud total del brazo	Producto a medida. La dimensión del implante depende de la longitud axial del ojo del paciente.
Material	Polimetilmetacrilato (PMMA) recubierto de silicona de grado médico.
Método de esterilización	Óxido de etileno (ETO).
Presentación	Explante único estéril. Producto a medida.
Caducidad	4,5 años



REV: 05. 07/2022



NPB MACULAR BUCKLE

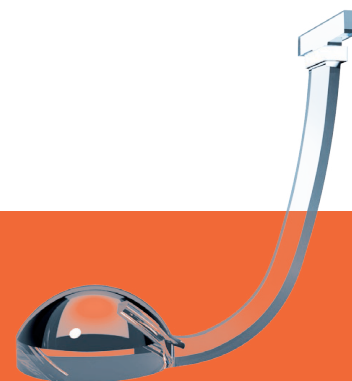

Macular Buckle

Reference	NPB
Brand name	NPB MACULAR BUCKLE
Definition	Macular Buckle
Indications	• Myopic macular retinoschisis with posterior staphyloma. • Retinal detachment associated with a myopic macular hole with posterior staphyloma.
Product description	The macular buckle is manufactured with PMMA that is coated with medical grade silicone, which increases its biocompatibility. It has an indented surface with a spherical shell at the top and an arm whose length varies depending on the axial length of the patient's eye. The silicone strap inserted in the arm of the implant facilitates the incorporation of a lighting probe that uses reflection for correct positioning of the indentation in the desired location.
Total length of the arm	Custom-made Device. The dimensions of the implant will depend on the axial length of the patient's eye.
Material	Polymethyl Methacrylate (PMMA) coated with medical grade silicone.
Sterilization method	Ethylene Oxide (ETO).
Supply	Sterile, single unit. Custom-made Device.
Shelf-life	4.5 years



REV: 05. 07/2022