



OCULFIT ESFÉRICO



Implante Orbitario


Nombre de marca	OCULFIT							
Referencias	6316-POI	6326-POI	6327-POI	8702-POI	6317-POI	8703-POI	6322-POI	8704-POI
Diámetro de esfera	14 mm	16 mm	18 mm	19 mm	20 mm	21 mm	22 mm	23 mm
Descripción e indicaciones	Los Implantes Orbitarios OCULFIT ESFÉRICOS están diseñados para ser utilizados después de las intervenciones habituales de enucleación o evisceración del globo ocular. Están fabricados a partir de polietileno de alta densidad, al estar demostrado que es un material tolerado por los tejidos y estable, proporcionando a los cirujanos materiales biocompatibles porosos para la reconstrucción orbitaria. La estructura de poros abiertos interconectados tiene la ventaja de permitir la vascularización y el crecimiento de tejidos blandos dentro de él. Estos implantes poseen una superficie anterior porosa lisa y cuatro túneles de sutura de poca profundidad con el fin de permitir una fácil fijación de los músculos rectos. La superficie porosa más lisa puede ayudar a minimizar la exposición de los implantes a largo plazo.							
Material	Polietileno poroso de alta densidad (HDPE).							
Método de esterilización	Óxido de etileno (ETO).							
Presentación	Envase unitario, estéril. Se acompaña de un accesorio introductor que facilita su implantación, evitando la adhesión de los tejidos en su trayecto.							
Caducidad	5 años							

CONFORMADOR PERFORADO



SE RECOMIENDA SU COLOCACIÓN INMEDIATAMENTE POSTERIOR AL ACTO QUIRÚRGICO.

Nombre de marca	AJL CONFORMADOR PERFORADO		
Referencias	CF-S-AJL	CF-M-AJL	CF-L-AJL
Tamaño	Pequeño: 22 x 19 x 1.2 mm	Mediano: 24 x 21 x 1.2 mm	Grande: 25 x 22 x 1.2 mm

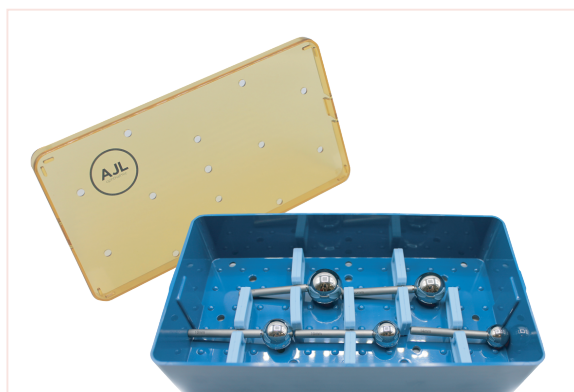

Nombre	SET MEDIDOR VOLUMEN ORBITAL
Referencia	AMB-A1-SET
Tamaño	14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm.

* Productos con marcado CE



REV: 05. 07/2022



OCULFIT SPHERICAL

Orbital Implant

Brand name	OCULFIT							
References	6316-POI	6326-POI	6327-POI	8702-POI	6317-POI	8703-POI	6322-POI	8704-POI
Sphere diameter	14 mm	16 mm	18 mm	19 mm	20 mm	21 mm	22 mm	23 mm
Description and Indications	OCULFIT SPHERICAL orbital implants are implants designed for orbital reconstruction following an evisceration or enucleation procedure. They are made from high-density polyethylene, which has been proven to be well tolerated by tissues and which provides stability, giving surgeons biocompatible porous materials for orbital reconstruction. The advantage of the structure of open, interconnected pores is that it enables vascularisation and the growth of soft tissue inside it. The anterior surface of Oculfit Orbital Implants is smooth and porous with four shallow suturing tunnels in an aim to facilitate the attachment of the rectus muscles. The smoother porous surface can help to minimise the exposure of the implants in the long term.							
Material	Hight density porous polyethylene.							
Sterilization method	Ethylene Oxide (ETO).							
Supply	Sterile, single container. The devices are accompanied by an insertion accessory that facilitates their implantation, avoiding the adhesion of the tissues in its path.							
Shelf-life	5 years							


PERFORATED CONFORMER



THE PERFORATED CONFORMER IS RECOMMENDED TO BE PLACED IMMEDIATELY AFTER THE SURGICAL PROCEDURE.

Brand name	AJL PERFORATED CONFORMER		
References	CF-S-AJL	CF-M-AJL	CF-L-AJL
Size	Small: 22 x 19 x 1.2 mm	Medium: 24 x 21 x 1.2 mm	Large: 25 x 22 x 1.2 mm

* Product with CE marking

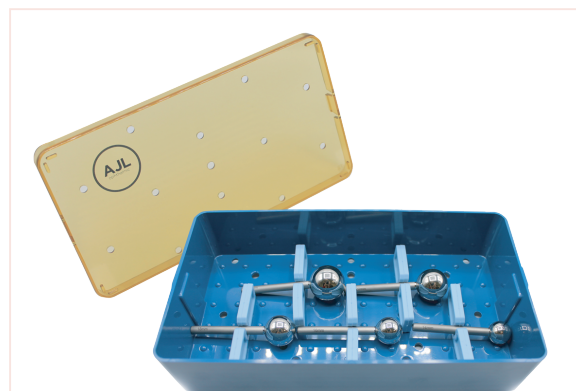

Brand name	ORBITAL VOLUME SIZER SET
Reference	AMB-A1-SET
Size	14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm.



REV: 05. 07/2022