




ESNOOPER V2000

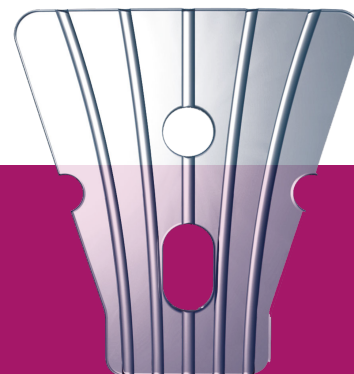

Implante de Glaucoma


Nombre de marca	ESNOOPER
Referencia	V2000
Descripción e indicación	El implante escleral ESNOOPER V2000 es un implante no reabsorbible, cuya finalidad es proporcionar un espacio intraescleral permanente fijo que facilite el drenaje del humor acuoso. Está indicado en el procedimiento de esclerectomía profunda no perforante (EPNP) en cirugías de glaucoma de ángulo abierto. El ESNOOPER se coloca en el lecho escleral, este método favorece la vía de drenaje trabecular, que es la salida clásica del humor acuoso.
Medidas	3,00mm X 1,40mm X 2,85mm.
Orificios	2 (sutura / drenaje).
Orificio longitudinal	Drenaje.
Material	Hidroxietil Metacrilato (HEMA).
Método de esterilización	Vapor.
Presentación	El implante ESNOOPER V2000 se presenta en un vial individual estéril alojado en una pinza-soporte, sumergido en agua altamente purificada que mantiene su adecuada hidratación.
Caducidad	3 años
* Producto con marcado CE	

Instrumental quirúrgico EPNP (recomendado)


Nombre de marca	KIT EPNP	Código de producto	AJL- KIT-001
Definición	Kit EPNP (Esclerectomía profunda no penetrante).		
Descripción	El kit de EPNP se presenta en blister de plástico rígido en el cual se agrupan las siguientes referencias (*): • EPNP-2001 Blefaro Liebermann 14mm. • EPNP-2002 Marcador Escleral doble. • EPNP-2003 Espátula Mermoud. • EPNP-2004 Pinza Mermoud. • EPNP-2005 Micro-tijera curva. • PST-4600A Caja de esterilización (10x16x2 cm).		
* Las piezas de instrumental se pueden suministrar de modo conjunto (Kit EPNP) o bien por separado.			



CE 2797

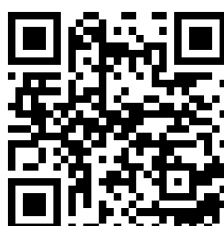

V-04-01-AAQ-IMP REV.00

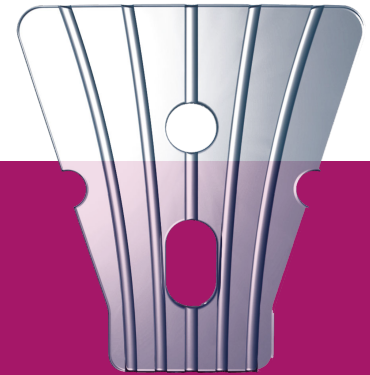

ESNOPER V2000

Glaucoma Implant

Brand name	ESNOPER
Reference	V2000
Description e indication	The ESNOPER V2000 scleral implant is a non-absorbable implant that provides a fixed, permanent intrascleral space that facilitates the drainage of aqueous humor. It is indicated for non-penetrating deep sclerectomy (NPDS) in open-angle glaucoma surgery. The ESNOPER is placed on the scleral bed, this method favors the trabecular way, which is the classic drainage way of the aqueous humor
Dimensions	3.00mm X 1.40mm X 2.85mm.
Orifices	2 (suture/drainage).
Longitudinal orifice	Drainage.
Material	Hydroxyethyl Methacrylate (HEMA).
Sterilisation method	Steam.
Package	The ESNOPER V2000 implant is supplied single and sterile in a vial, housed by a clamp support that is immersed in high purified water to maintain it properly hydrated.
Shelf-life	3 years

* Product with CE marking

NPDS surgical instruments (recommended)

Brand name	KIT EPNP	Product code	AJL- KIT-001
Definition	NPDS (non-penetrating deep sclerectomy) Kit .		
Description	The NPDS Kit is presented non sterile in a rigid plastic blister with the following items (*): • EPNP-2001 Liebermann Speculum 14mm. • EPNP-2002 Double Scleral Marker. • EPNP-2003 Mermoud Spatula. • EPNP-2004 Mermoud Clamp. • EPNP-2005 Curved micro-scissor. • PST-4600A Sterilisation box (10x16x2 cm).		

* The instruments can be supplied as a set (NPDS Kit) or separately.



CE 2797

