




ENDO-K PRO

Implante Interconal para Trasplante de Córnea

<i>Nombre de marca</i>	ENDO-K PRO			
<i>Referencias</i>	EQP75	EQP80	EQP85	EQP90
<i>Diámetro exterior</i>	7,50 mm	8,00 mm	8,50 mm	9,00 mm
<i>Descripción e indicaciones del producto</i>	El implante intercorneal ENDO-K PRO es un producto sanitario fabricado en una única pieza de PMMA, cuyo diseño consta de un anillo externo y una plataforma central sin función óptica, unidos en diferente plano para crear un espacio que actuará como pseudocámara separando el lecho estromal de la córnea receptora del paciente y el injerto donante			
<i>Especificaciones del implante</i>	AJL Ophthalmic S.A. comercializa diferentes referencias de ENDO-K PRO, con diámetros del anillo exterior diferentes: de 7,5, 8,0, 8,5 y 9,0 mm. Esto permite ajustar el dispositivo al diámetro de la trepanación que se haga en cada intervención, para una mayor personalización en pacientes con complicaciones que requieran diámetros fuera del rango típico de trepanación			
<i>Indicaciones de uso</i>	El implante intercorneal ENDO-K PRO está indicado en casos de ojos con mal pronóstico para realizar un trasplante de córnea penetrante. Este tipo de pacientes suelen presentar alteraciones de la córnea que afectan a todo su espesor y asociarse con una patología grave, intraocular o extraocular. En particular, el ENDO-K PRO está indicado en las siguientes circunstancias: <ul style="list-style-type: none">- Edema de córnea irreversible (sin o con neovasos)- Lensectomía (sin o con lente intraocular)			
<i>Material</i>	PMMA (Polimetil metacrilato)			
<i>Método de esterilización</i>	Óxido de etileno (ETO)			
<i>Presentación</i>	Envase unitario, estéril			
<i>Caducidad</i>	4.5 años			

CE 0318

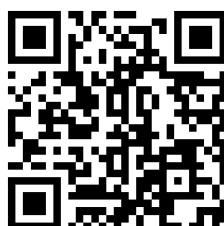

V-04-01-AAG-IMP REV.02